


**RACCOLTA E SPEDIZIONE  
DEL SANGUE E DEL TESSUTO  
CORDONALE**

**ISTRUZIONI PER I GENITORI**

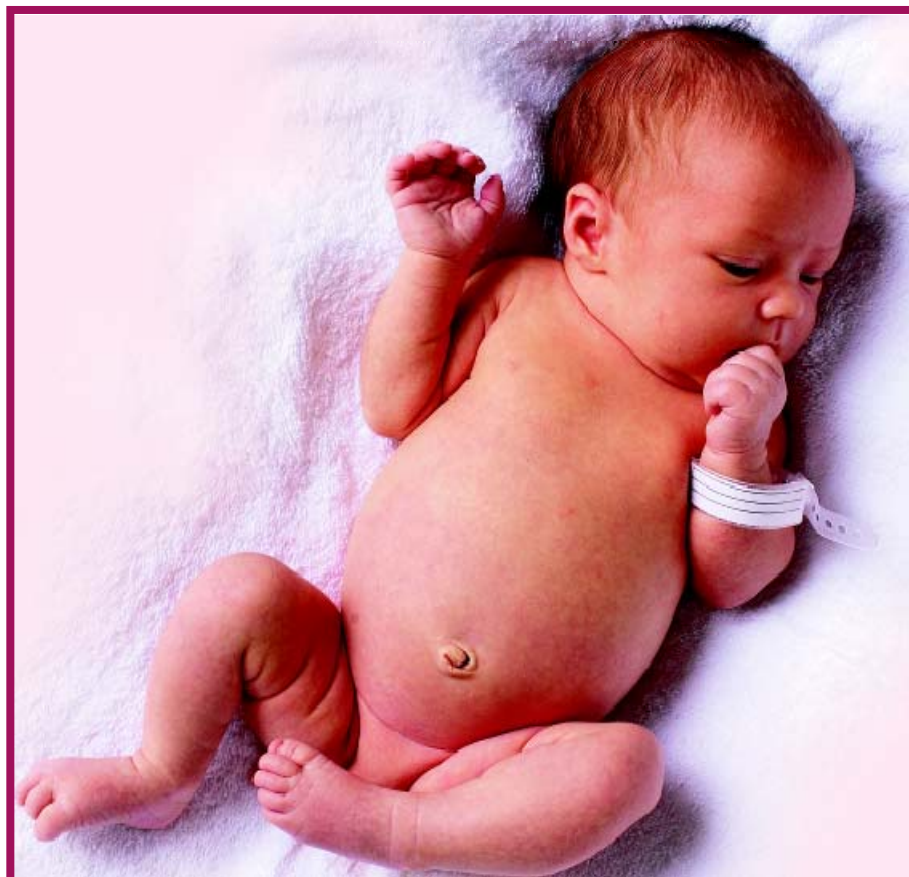

**Elenco del materiale contenuto nel Kit per la raccolta del sangue e del tessuto cordonale**

1. All'interno della scatola di trasporto si trova un contenitore cilindrico, di plastica con coperchio a vite, contenente il seguente materiale, che deve essere utilizzato dagli operatori sanitari per fare la raccolta del sangue e del tessuto cordonale:
  - Un sacchetto per la raccolta del sangue cordonale (in busta argentata)
  - Garze sterili e garze imbevute di soluzione iodica per la disinfezione del cordone
  - Forbici sterili
  - Sacchetto di plastica con chiusura contenente tessuto assorbente
  - 2 provette da 10ml ed 1 da 5ml per inviarc 3 campioni di sangue materno.
  - Una sacca di plastica con chiusura di sicurezza contenente: una provetta con tappo giallo con 25ml di soluzione sterile salina (fisiologica), una garza assorbente ed una garza imbevuta di soluzione iodica per disinfettare il cordone ombelicale.



**KIT FUTURE HEALTH PER LA RACCOLTA DI SANGUE CORDONALE**  
(fornito da: Pall Medical Blood Collection System)



2. Istruzioni per i genitori
3. Istruzioni per gli operatori sanitari
4. Modulo informativo
5. Consenso informato
6. Accordo per la conservazione di cellule staminali
7. Anamnesi medica aggiuntiva della madre (West Nile Virus)
8. Lettera di vettura DHL prepagata e precompilata
9. “Coolpack” da non mettere in frigorifero (salvo nostre indicazioni contrarie).

### **Istruzioni per i genitori per la preparazione dei documenti**

#### **Documenti da compilare e inserire all'interno del kit:**

- ✓ Modulo informativo
- ✓ Consenso informato
- ✓ Accordo per la conservazione di cellule staminali (firmare e compilare l'Accordo in tutte le sue parti)
- ✓ Anamnesi medica aggiuntiva della madre (West Nile Virus)
- ✓ Scelta della modalità di pagamento (allegato 1c)

#### **Documenti da consegnare al corriere:**

- ✓ Documento di trasporto DHL precompilato e prepagato. Quando chiamate il corriere DHL per prenotare il ritiro del vostro campione (al numero di telefono 199 199 345), dovete fornire all'operatore lo “shipper's account number”: 964906897 (vedere documento di trasporto DHL) e chiedere il codice di prenotazione e codice “special”. L'operatore DHL vi informerà della fascia oraria del ritiro.

Se la nascita avviene al di fuori dell'orario d'ufficio chiamate la mattina successiva (09.00/18.00 dal lunedì al venerdì, per parto di fine settimana, chiamate il lunedì)



- ✓ Nullaosta rilasciato dal Ministero della Salute che autorizza l'esportazione del sangue cordonale *(è indispensabile l'Autorizzazione Ministeriale, il campione non può partire senza questo documento)*

#### **Etichette:**

- ✓ Etichette rosse/bianche: 1 da compilare e consegnare all'ostetrica assieme al cilindro di plastica in sala parto (l'altra etichetta è extra)
- ✓ Sigilli blu di sicurezza per la chiusura della scatola di trasporto prima di consegnarlo al corriere

#### **Coolpack:**

- ✓ Se la temperatura esterna supera i 35 gradi centigradi, posizionate il coolpack per qualche ora in freezer. Successivamente inserirlo all'interno del kit nella sua posizione originaria.

### **Istruzioni per i genitori per la preparazione del kit**

1. Togliete il contenitore cilindrico dalla scatola di trasporto con tutto il suo contenuto e consegnatelo al Medico o all'Ostetrica che si occuperà della raccolta (la scatola di trasporto sarà successivamente utilizzata per trasportare il campione in Inghilterra), con una delle etichette compilate che andrà attaccata al sacchetto del sangue cordonale.
2. Gli operatori sanitari devono posizionare il sacchetto del sangue cordonale ed la provetta con il tessuto cordonale all'interno dei rispettivi sacchetti trasparenti con chiusura di sicurezza, inserendo successivamente questi ultimi, all'interno del contenitore cilindrico con il coperchio a vite.
3. **IMPORTANTE** : Controllate che siano state inserite nel contenitore cilindrico le 3 provette con il sangue materno.



4. Compilate la seconda etichetta che si trova già attaccata all'esterno del contenitore cilindrico (rimane un etichetta extra)
5. Mettete il contenitore cilindrico all'interno della scatola di trasporto.
6. Mettete dentro la scatola di trasporto, dopo averli compilati e firmati, il 'Modulo informativo', il 'Consenso informato', l'anamnesi aggiuntiva della mamma e l'Accordo per la conservazione delle cellule staminali.
7. Prendete i sigilli blu di sicurezza che si trovano all'interno della scatola. Riposizionate la copertura di polistirolo in alto e chiudete la scatola sigillandola con i sigilli blu.

**Il sangue cordonale ed il tessuto cordonale devono  
essere mantenuto nella scatola coibentata  
a temperatura ambiente (18°C - 26°C)  
finché non viene consegnato al Corriere.**

**Tenetelo lontano dalle fonti di calore.**

**Non è necessario metterlo in frigorifero e  
comunque non deve essere mai messo in freezer!**

**Ricordatevi di avvertire il nostro Servizio Assistenza Genitori dell'avvenuto ritiro**

**Lunedì – venerdì (9.00 – 18.00) = +39 - 06 9025161**

**Lunedì – venerdì (dopo le 18.00) = +39 - 339 777 2113**

**Weekend e giorni festivi = +39 - 339 777 2113**